

Register your instrument!
www.eppendorf.com/myeppendorf



Eppendorf ThermoMixer® F0.5/F1.5/F2.0/FP

Istruzioni per l'uso

Copyright ©2014 Eppendorf AG, Hamburg, Germany. All rights reserved, including graphics and images. No part of this publication may be reproduced without the prior permission of the copyright owner.

Eppendorf® and the Eppendorf logo are registered trademarks of Eppendorf AG, Hamburg, Germany.

Eppendorf ThermoMixer®, Eppendorf ThermoTop®, and ***condens.protect***® are registered trademarks of Eppendorf AG, Hamburg, Germany.

Registered trademarks and protected trademarks are not marked in all cases with ® or ™ in this manual.

Indice

1	Avvertenze per l'utilizzo	5
1.1	Impiego delle presenti istruzioni	5
1.2	Simboli di pericolo e gradi di pericolo	5
1.2.1	Simboli di pericolo	5
1.2.2	Gradi di pericolo	5
1.3	Convenzioni grafiche	6
1.4	Abbreviazioni	6
1.5	Glossario	6
2	Descrizione del prodotto	7
2.1	Illustrazione generale	7
2.2	Dotazione	8
2.2.1	Eppendorf ThermoMixer F0.5, Eppendorf ThermoMixer F1.5, Eppendorf ThermoMixer F2.0	8
2.2.2	Eppendorf ThermoMixer FP	8
2.3	Caratteristiche del prodotto	9
3	Avvertenze di sicurezza generali	11
3.1	Uso conforme	11
3.2	Richiesta all'utente	11
3.3	Note sulla responsabilità da prodotto	11
3.4	Pericoli in caso di uso conforme	12
3.5	Simboli di pericolo sull'apparecchio	16
4	Installazione	17
4.1	Scelta dell'ubicazione	17
4.2	Installazione dell'apparecchio	17
5	Uso	18
5.1	Panoramica elementi di comando	18
5.2	Utilizzo di provette e piastre	20
5.3	Installazione di ThermoTop	21
5.4	Miscelazione	21
5.4.1	Miscelazione senza controllo della temperatura	22
5.4.2	Miscelazione e controllo della temperatura	22
5.4.3	Short Mix	22
5.5	Controllo della temperatura	23
5.5.1	Controllo della temperatura senza procedura di miscelazione	23
5.6	Menu	24
5.6.1	Navigazione all'interno del menu	24
5.6.2	Struttura del menu	24
5.7	Caricamento dei parametri salvati	25

6	Risoluzione dei problemi	26
6.1	Anomalie generiche	26
6.2	Messaggi di anomalia	26
7	Manutenzione	27
7.1	Impostazione dell'intervallo di manutenzione	27
7.2	Pulizia	27
7.3	Disinfezione/Decontaminazione	28
7.4	Decontaminazione prima della spedizione	29
7.5	Validazione del controllo della temperatura	29
8	Trasporto, immagazzinamento e smaltimento	30
8.1	Trasporto	30
8.2	Immagazzinamento	30
8.3	Smaltimento	30
9	Specifiche tecniche	32
9.1	Alimentazione	32
9.2	Peso/dimensioni	32
9.3	Condizioni ambientali	32
9.4	Parametri di applicazione	33
9.4.1	Controllo della temperatura	33
9.4.2	Miscelazione	33
9.5	Interfaccia	33
10	Informazioni per l'ordine	34
10.1	Apparecchio e accessori	34
10.2	Provette e piastre	34
10.3	Temperature Verification System	35
	Indice	36
	Certificates	39

1 Avvertenze per l'utilizzo

1.1 Impiego delle presenti istruzioni

- ▶ Prima di mettere in funzione l'apparecchio per la prima volta, leggere le presenti istruzioni per l'uso. Se necessario, attenersi alle istruzioni per l'uso degli accessori.
- ▶ Le presenti istruzioni per l'uso fanno parte del prodotto e vanno conservate in un punto facilmente raggiungibile.
- ▶ Accludere sempre il manuale di istruzioni in caso di trasferimento dell'apparecchio a terzi.
- ▶ La versione attuale delle istruzioni per l'uso nelle lingue disponibili si può consultare sulla pagina web www.eppendorf.com.

1.2 Simboli di pericolo e gradi di pericolo

Le avvertenze di sicurezza riportate nelle presenti istruzioni sono contraddistinte dai simboli e gradi di pericolo indicati di seguito.

1.2.1 Simboli di pericolo

	Rischio biologico		Esplosione
	Scossa elettrica		Superficie calda
	Punto pericoloso		Pericolo di incendio
	Schiacciamento		Danno materiale

1.2.2 Gradi di pericolo

PERICOLO	<i>Causa lesioni gravi o mortali.</i>
AVVERTENZA	<i>Può provocare lesioni gravi o mortali.</i>
ATTENZIONE	<i>Può provocare lesioni di lieve o media entità.</i>
AVVISO	<i>Può provocare danni materiali.</i>

1.3 Convenzioni grafiche

Illustrazione	Significato
1.	Operazioni nell'ordine descritto
2.	
▶	Operazioni senza un ordine predefinito
•	Elenco
Testo	Testi sul display o testi del software
i	Informazioni aggiuntive

1.4 Abbreviazioni

PCR

Reazione a catena della polimerasi

rpm

Revolutions per minute – giri minuto – in rpm

1.5 Glossario

Piastra deepwell Piastra a 48, 96 o 384 pozzetti con un volume superiore rispetto alle micropiastre per test. Idonea per il trattamento, la miscelazione, la centrifugazione, il trasporto e la conservazione di campioni solidi e liquidi.



Lid Coperchio per il blocco termico. Garantisce un controllo della temperatura omogeneo e protegge i campioni da un'esposizione alla luce indesiderata.

Micropiastra per test Piastra con 24, 48, 96 o 384 pozzetti per la preparazione, la miscelazione, la centrifugazione, il trasporto e la conservazione di campioni solidi e liquidi.



Piastra PCR Piastra con 96 o 384 pozzetti per la reazione a catena della polimerasi

ThermoTop Cappa riscaldata per il blocco termico. Previene la formazione di condensa sulla parete o sul tappo della provetta grazie alla tecnologia *condens.protect*.

Pozzetto Recipiente a cavità di una micropiastra per test, di una piastra PCR o Deepwell.

2 Descrizione del prodotto

2.1 Illustrazione generale

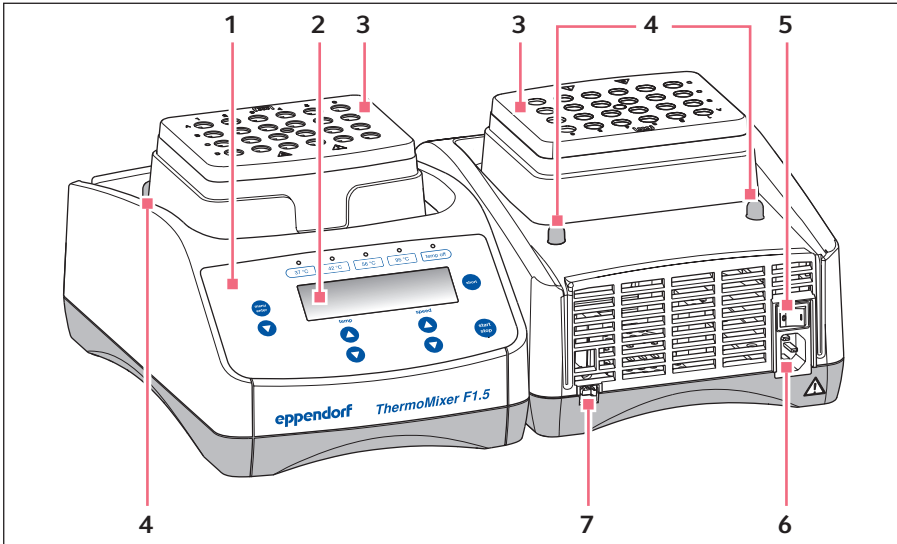


Fig. 2-1: ThermoMixer F1.5 (simile a ThermoMixer F0.5 e ThermoMixer F2.0)

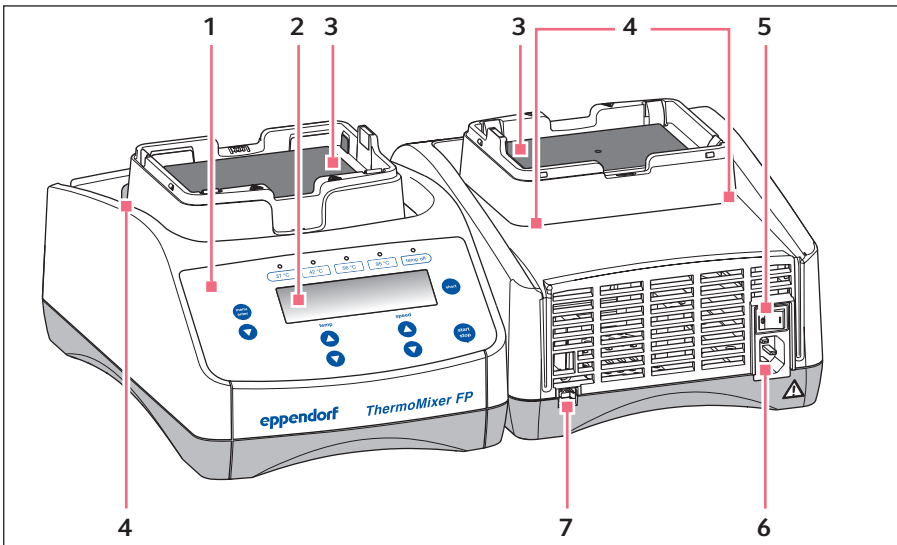


Fig. 2-2: ThermoMixer FP

8 Descrizione del prodotto
Eppendorf ThermoMixer® F0.5/F1.5/F2.0/FP
 Italiano (IT)

- | | |
|------------------------------|--|
| 1 Elementi di comando | 5 Interruttore di rete |
| 2 Display | 6 Presa di collegamento alla rete |
| 3 Blocco termico | 7 Interfaccia USB (solo per l'assistenza Eppendorf) |
| 4 Perni di centraggio | |

2.2 Dotazione

2.2.1 Eppendorf ThermoMixer F0.5, Eppendorf ThermoMixer F1.5, Eppendorf ThermoMixer F2.0

Quantità	Cod. ord. (versione internazionale)	Cod. ord. (America settentrionale)	Descrizione
1	5386 000.010	5386000028	ThermoMixer F0.5 con blocco termico per 24 provette da 0,5 mL
o 1	5384 000.012	5384000020	ThermoMixer F1.5 con blocco termico per 24 provette da 1,5 mL
o 1	5387 000.013	5387000021	ThermoMixer F2.0 con blocco termico per 24 provette da 2,0 mL
1	–	–	Cavo di rete
1	5384 900.013		Istruzioni per l'uso ThermoMixer F0.5/F1.5/F2.0/FP
1	5384 900.021		Istruzioni per l'uso in breve ThermoMixer F0.5/F1.5/F2.0/FP
1	–	–	Certificate of Quality

2.2.2 Eppendorf ThermoMixer FP

Quantità	Cod. ord. (versione internazionale)	Cod. ord. (America settentrionale)	Descrizione
1	5385 000.016	5385000024	ThermoMixer FP con blocco termico per micropiastre e piastre Deepwell
1	–	–	Cavo di rete
1	5363 000.233	5363000233	Lid per ThermoMixer F0.5/F1.5/F2.0/FP
1	5384 900.013		Istruzioni per l'uso ThermoMixer F0.5/F1.5/F2.0/FP

Quantità	Cod. ord. (versione internazionale)	Cod. ord. (America settentrionale)	Descrizione
1	5384 900.021		Istruzioni per l'uso in breve ThermoMixer F0.5/F1.5/F2.0/FP
1	–	–	Certificate of Quality



- ▶ Controllare che la consegna sia completa.
- ▶ Controllare che nessun componente presenti danni da trasporto.
- ▶ Per trasportare e conservare il dispositivo in tutta sicurezza, conservare la scatola per il trasporto e il materiale di imballaggio.

2.3 Caratteristiche del prodotto

Con Eppendorf ThermoMixer F0.5/F1.5/F2.0/FP è possibile eseguire due procedure base della preparazione dei campioni in una sola fase di lavoro, in tutta praticità.

- Eppendorf ThermoMixer F0.5: per 24 provette da 0,5 mL (ad es. Eppendorf Safe-Lock Tubes)
- Eppendorf ThermoMixer F1.5: per 24 provette da 1,5 mL (ad es. Eppendorf Safe-Lock Tubes)
- Eppendorf ThermoMixer F2.0: per 24 provette da 2,0 mL (ad es. Eppendorf Safe-Lock Tubes)
- Eppendorf ThermoMixer FP: tutti i classici formati di piastre (ad es. Eppendorf Microplates o Eppendorf Deepwell Plates).

Controllo della temperatura

- Le temperature da 4 °C al di sopra della temperatura ambiente a 100 °C sono mantenute in modo preciso e costante.
- Le temperature 37 °C, 42 °C, 56 °C, 95 °C possono essere selezionate direttamente.

Miscelazione

- La tecnologia anti-spill consente di evitare che il tappo della provetta si bagni e previene la contaminazione crociata.
- Eppendorf ThermoMixer F1.5, Eppendorf ThermoMixer F2.0: si possono selezionare frequenze di miscelazione tra 300 rpm e 1 500 rpm.
- Eppendorf ThermoMixer F0.5, Eppendorf ThermoMixer FP: si possono selezionare frequenze di miscelazione tra 300 rpm e 2 000 rpm.
- La tecnologia ^{2D}Mix-Control consente una miscelazione rapida e completa anche dei volumi più piccoli grazie ad un movimento di miscelazione controllato ed efficiente.
- **Short Mix:** miscelazione breve e semplice dei campioni. La procedura di miscelazione viene eseguita alla velocità selezionata solo se si tiene premuto il tasto **short**.

10 **Descrizione del prodotto**
Eppendorf ThermoMixer® F0.5/F1.5/F2.0/FP
Italiano (IT)

Lid e ThermoTop

- Lid garantisce un controllo della temperatura omogeneo e protegge i campioni da un'esposizione alla luce indesiderata.
- ThermoTop previene la formazione di condensa sulla parete o sul tappo della provetta grazie alla tecnologia ***condens.protect***.

3 Avvertenze di sicurezza generali

3.1 Uso conforme

Eppendorf ThermoMixer F0.5/F1.5/F2.0/FP è previsto per l'impiego in laboratori di biologia molecolare.

Eppendorf ThermoMixer F0.5/F1.5/F2.0/FP serve alla regolazione della temperatura e alla miscelazione di liquidi in provette e piastre chiuse per la preparazione e l'elaborazione di campioni.

Eppendorf ThermoMixer F0.5/F1.5/F2.0/FP è destinato esclusivamente all'utilizzo in ambienti chiusi. Le normative sulla sicurezza del paese di riferimento per l'impiego di apparecchi elettrici nei laboratori devono essere rispettate.

Usare esclusivamente accessori Eppendorf o raccomandati da Eppendorf.

3.2 Richiesta all'utente

L'apparecchio e gli accessori possono essere utilizzati solo da personale specializzato appositamente addestrato.

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e il manuale d'uso degli accessori e prendere conoscenza delle sue modalità operative.

3.3 Note sulla responsabilità da prodotto

Nei seguenti casi la responsabilità da prodotto prevista per l'apparecchio può decadere. La responsabilità per eventuali danni personali e materiali derivanti passa al gestore se:

- l'apparecchio non viene utilizzato conformemente alle istruzioni per l'uso;
- l'apparecchio viene utilizzato per un uso non conforme all'impiego previsto;
- l'apparecchio viene utilizzato con accessori o materiali di consumo diversi da quelli raccomandati da Eppendorf;
- la manutenzione o la riparazione dell'apparecchio viene eseguita da persone non autorizzate da Eppendorf;
- l'utente effettua modifiche non autorizzate dell'apparecchio.

3.4 Pericoli in caso di uso conforme

Prima di utilizzare Eppendorf ThermoMixer F0.5/F1.5/F2.0/FP, leggere le istruzioni per l'uso e osservare le seguenti avvertenze di sicurezza generali.



PERICOLO! Pericolo di esplosione.

- ▶ Non mettere in funzione il dispositivo in ambienti in cui si lavora con sostanze a rischio di esplosione.
- ▶ Con questo dispositivo, non trattare sostanze esplosive o che possano reagire violentemente.
- ▶ Con questo dispositivo, non trattare alcuna sostanza che possa generare un'atmosfera esplosiva.



PERICOLO! Scosse elettriche dovute all'infiltrazione di liquidi.

- ▶ Prima di procedere con la manutenzione o la pulizia, spegnere l'apparecchio e staccarlo dalla rete elettrica.
- ▶ Impedire ai liquidi di penetrare all'interno dell'alloggiamento.
- ▶ Utilizzare provette e piastre chiuse.
- ▶ Non effettuare alcuna pulizia o disinfezione a spruzzo sul corpo dell'apparecchio.
- ▶ Collegare di nuovo l'apparecchio all'alimentazione elettrica solo dopo averne completamente asciugato l'interno e l'esterno.



AVVERTENZA! Folgorazione dovuta a danni all'apparecchio o al cavo di rete.

- ▶ Accendere l'apparecchio solo se questo e il cavo di rete non sono danneggiati.
- ▶ Mettere in funzione solo apparecchi che siano stati installati o riparati in modo appropriato.
- ▶ In caso di pericolo, isolare l'apparecchio dalla tensione di rete rimuovendo il connettore dall'apparecchio o dalla presa oppure utilizzando l'apposito dispositivo di esclusione della rete elettrica (ad es. il pulsante di emergenza in laboratorio).



AVVERTENZA! Tensioni pericolose all'interno dell'apparecchio.

- ▶ Assicurarsi che il corpo dell'apparecchio sia sempre chiuso e integro, in modo che non sia possibile toccare inavvertitamente alcun componente all'interno dell'apparecchio.
- ▶ Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio.
- ▶ Impedire ai liquidi di penetrare all'interno dell'alloggiamento.
- ▶ Far aprire il dispositivo esclusivamente dal personale del servizio di assistenza autorizzato da Eppendorf.



AVVERTENZA! Pericolo a causa dell'alimentazione di tensione errata.

- ▶ Collegare il dispositivo soltanto a fonti di alimentazione di tensione che soddisfano i criteri elettrici della targhetta identificativa.
- ▶ Utilizzare esclusivamente le prese dotate di messa a terra e un cavo di rete adeguato.



AVVERTENZA! Pericolo di ustioni causate da superfici roventi.

Il blocco termico dopo il riscaldamento può diventare molto caldo e causare bruciature.

- ▶ Evitare il contatto diretto con il blocco termico quando la sua temperatura è estremamente elevata.



AVVERTENZA! Danni alla salute dovuti a liquidi infettivi e germi patogeni.

- ▶ Per il contatto con liquidi infettivi e germi patogeni, attenersi alle disposizioni nazionali, al livello di sicurezza biologica del vostro laboratorio e alle schede di sicurezza e alle istruzioni per l'uso dei produttori.
- ▶ Indossare i dispositivi di protezione individuale.
- ▶ Per le disposizioni complete per il contatto con germi o materiali biologici della categoria di rischio II o superiore, fare riferimento al "Manuale di sicurezza nel laboratorio biologico" (fonte: Organizzazione Mondiale della Sanità, Manuale di sicurezza nel laboratorio biologico, nella rispettiva versione attualmente in vigore).



AVVERTENZA! Pericolo di incendio.

- ▶ Non trattare sostanze leggermente infiammabili con questo dispositivo.



AVVERTENZA! Pericolo per la salute dovuto a contaminazione del dispositivo e degli accessori.

- ▶ Decontaminare l'apparecchio e gli accessori, prima di conservarli o spedirli.

**AVVERTENZA! Lesioni a causa dell'utilizzo del consumabile sbagliato.**

- Provette o piastre che non possono essere sistemate in modo appropriato nel blocco termico possono fuoriuscire dalla loro sede.
- Le provette di vetro possono rompersi.
 - ▶ Utilizzare i blocchi termici soltanto con i consumabili previsti per il loro utilizzo.
 - ▶ Non impiegare mai provette in vetro o altri materiali fragili.

**AVVERTENZA! Contaminazione a causa di chiusure dei consumabili che si aprono.**

Nei casi indicati di seguito le chiusure di provette e piastre possono aprirsi. Il materiale dei campioni può fuoriuscire.

- Elevata pressione di vapore del contenuto.
- Coperchio chiuso in modo non adeguato.
- Bordo di tenuta danneggiato.
- Pellicola non fissata in modo adeguato.
 - ▶ Prima dell'utilizzo controllare sempre che i consumabili siano chiusi saldamente.

**AVVERTENZA! Pericolo di lesioni dovute alla fuoriuscita del materiale campione.**

Il materiale campione può fuoriuscire da piastre e provette aperte, chiuse in modo inadeguato o instabili.

- ▶ Miscelare solo in recipienti e piastre chiusi.
- ▶ In caso di lavori con campioni pericolosi, nocivi e patogeni, osservare le normative sulla sicurezza del paese di riferimento. In particolare quelle riguardanti i dispositivi di protezione individuale (guanti, indumenti, occhiali, ecc.) all'aerazione e alla classe di sicurezza del laboratorio.

**ATTENZIONE! Rischi per la sicurezza dovuti ad accessori e pezzi di ricambio errati.**

Gli accessori e i pezzi di ricambio non raccomandati da Eppendorf pregiudicano la sicurezza, il funzionamento e la precisione del dispositivo. Per i danni causati da accessori o pezzi di ricambio che non siano quelli raccomandati da Eppendorf o dovuti ad un utilizzo improprio, si esclude ogni garanzia e responsabilità da parte di Eppendorf.

- ▶ Usare esclusivamente accessori raccomandati da Eppendorf e pezzi di ricambio originali.



ATTENZIONE! Pericolo di schiacciamento a causa di parti in movimento.

- ▶ Non cambiare i consumabili durante la procedura di miscelazione.
- ▶ Prima della procedura di miscelazione inserire ThermoTop oppure il coperchio.
- ▶ Non rimuovere ThermoTop o il coperchio durante la procedura di miscelazione.



AVVISO! Danni dovuti alle forti vibrazioni.

Durante la miscelazione ad alte velocità, gli oggetti che si trovano in prossimità dell'apparecchio, a causa delle vibrazioni del piano di lavoro, si possono spostare e ad es. cadere dal tavolo.

- ▶ Non collocare oggetti che potrebbero muoversi con facilità in prossimità del dispositivo, oppure fissarli in modo adeguato.



AVVISO! Danneggiamento del display a causa di pressione meccanica.

- ▶ Non esercitare alcuna pressione meccanica sul display.



AVVISO! Danni dovuti a surriscaldamento.

- ▶ Non installare il dispositivo in prossimità di fonti di calore (ad es. riscaldamento, essiccatore).
- ▶ Non esporre il dispositivo alla luce diretta del sole.
- ▶ Assicurarsi che l'aria possa circolare liberamente. Mantenere una distanza di almeno 10 cm (3.9 in) da ogni foro di aerazione.



AVVISO! Danni ai componenti elettronici dovuti a formazione di condensa.

In seguito al trasporto dell'apparecchio da un ambiente freddo a un ambiente più caldo si può formare della condensa all'interno dell'apparecchio stesso.




- ▶ Dopo l'installazione del dispositivo, aspettare almeno 3 h. Soltanto dopo collegare il dispositivo alla rete elettrica.



AVVISO! Danni dovuti a sostanze chimiche aggressive.

- ▶ Non utilizzare sull'apparecchio e sugli accessori prodotti chimici aggressivi quali, ad esempio, basi forti e deboli, acidi forti, acetone, formaldeide, idrocarburi alogenati o fenoli.
- ▶ In caso di contaminazione con sostanze chimiche aggressive, pulire immediatamente l'apparecchio con un detergente neutro.

3.5 Simboli di pericolo sull'apparecchio

Illustrazione	Significato	Ubicazione
	Pericolo di ustioni causate da superfici roventi.	Lato superiore dell'apparecchio
	► Attenersi a quanto indicato nelle istruzioni per l'uso.	Parte posteriore dell'apparecchio
	Attenzione! Lesioni a causa di parti in movimento. ► Attenersi a quanto indicato nelle istruzioni per l'uso.	Sul blocco termico

4 Installazione

4.1 Scelta dell'ubicazione

Scegliere l'ubicazione dell'apparecchio in base ai criteri indicati di seguito.

- Collegamento alla rete come da targhetta identificatrice.
- Distanza minima rispetto ad altri dispositivi e alle pareti: 10 cm (3.9 in).
- Tavolo antirisonante con superficie di lavoro piana e orizzontale.
- Il tavolo è concepito appositamente per il funzionamento dell'apparecchio.
- Il tavolo è concepito appositamente per il peso dell'apparecchio.
- Il luogo di collocazione è ben aerato.
- L'ubicazione del dispositivo non è esposta alla luce diretta del sole.



Durante l'utilizzo l'interruttore di rete e il dispositivo di esclusione della rete elettrica devono essere accessibili (ad es. interruttore differenziale).

4.2 Installazione dell'apparecchio



AVVERTENZA! Pericolo a causa dell'alimentazione di tensione errata.

- ▶ Collegare il dispositivo soltanto a fonti di alimentazione di tensione che soddisfano i criteri elettrici della targhetta identificativa.
- ▶ Utilizzare esclusivamente le prese dotate di messa a terra e un cavo di rete adeguato.

-
1. Porre Eppendorf ThermoMixer F0.5/F1.5/F2.0/FP su una superficie di lavoro adeguata. Installare l'apparecchio in modo da garantire l'ingresso dell'aria nei fori di aerazione dell'apparecchio.
 2. Collegare il cavo di rete alla presa di collegamento alla rete del dispositivo e alla rete elettrica.

5 **Uso**

5.1 **Panoramica elementi di comando**

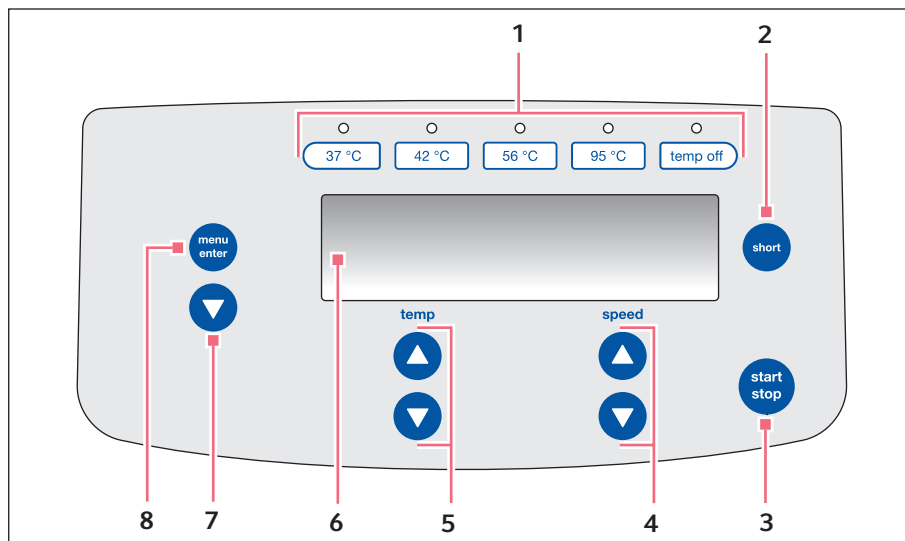


Fig. 5-1: Elementi di comando

- | | |
|---|---|
| <p>1 Tasti della temperatura con LED di controllo
Selezionare la temperatura o disattivare il controllo della temperatura</p> <p>2 Tasto short
Short Mix in funzione solo se si tiene premuto il tasto short (vedi a pag. 22).</p> <p>3 Tasto start/stop
Avvio o arresto della miscelazione/del controllo della temperatura</p> <p>4 Tasti frecciaspeed
Regolare la frequenza di miscelazione
Tenere premuto il tasto freccia: impostazione rapida</p> | <p>5 Tasti frecciatemp
Impostazione della temperatura
Tenere premuto il tasto freccia: impostazione rapida
Non appena la temperatura selezionata viene modificata, l'apparecchio inizia ad effettuare il controllo della temperatura.</p> <p>6 Display</p> <p>7 Tasto freccia del menu
Navigazione all'interno del menu: impostazione della modalità Time o del volume</p> <p>8 Tasto menu/enter
Aprire il menu
Conferma della scelta</p> |
|---|---|

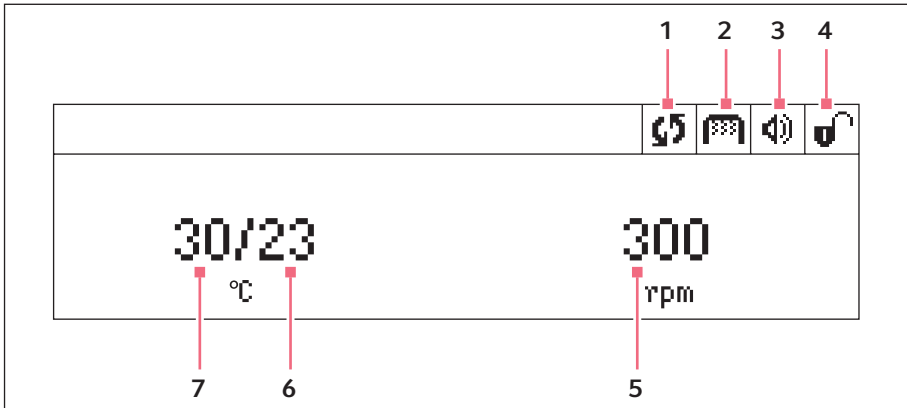


Fig. 5-2: Display Eppendorf ThermoMixer F0.5/F1.5/F2.0/FP

1 Stato del dispositivo

🔄 L'apparecchio miscela/controlla la temperatura.

2 ThermoTop

📏 ThermoTop è inserito.

Per evitare la formazione di condensa, il dispositivo riscalda ThermoTop prima della regolazione della temperatura del blocco termico.

3 Altoparlanti

🔊 Altoparlanti accesi.

🔇 Altoparlanti spenti.

4 Blocca tasti

🔒 Blocco tasti attivato: i parametri non possono essere modificati.

🔓 Nessun blocco dei tasti.

5 Frequenza di miscelazione

6 Temperatura effettiva

Se la temperatura effettiva lampeggia sul display, l'apparecchio non effettua il controllo della temperatura.

7 Temperatura selezionata

Se la temperatura effettiva è raggiunta, viene visualizzato solo un valore.

5.2 Utilizzo di provette e piastre

**AVVISO! Piazze danneggiate a causa di temperature troppo elevate.**

Le micropiastre per test in polistirolo fondono a temperature superiori a 70 °C. Le piastre deepwell in polipropilene si deformano a temperature superiori a 80 °C. Le piastre deformate possono staccarsi dal blocco termico.

- ▶ Regolare la temperatura delle micropiastre per test solo fino a 70 °C.
- ▶ Se la temperatura delle piastre deepwell viene regolata al di sopra di 80 °C, non superare la frequenza di miscelazione di 1.000 giri/min.

**AVVISO! Modifica del materiale dei prodotti consumabili in caso di temperature estreme.**

Le temperature estreme (ad es. durante la refrigerazione o il trattamento in autoclave) influiscono sul materiale. La resistenza meccanica, le dimensioni e la forma dei prodotti consumabili variano.

- ▶ Utilizzare prodotti consumabili adatti all'intervallo di temperatura e alla procedura selezionati.



Il sensore dell'altezza di Eppendorf ThermoMixer FP distingue automaticamente le piastre deepwell dalle micropiastre per test.


- ▶ In caso di utilizzo di micropiastre per test assicurarsi che il sensore dell'altezza non venga coperto.
- ▶ Assicurarsi che il sensore dell'altezza non sia sporco.

Inserimento della piastra

- ▶ Appoggiare per primo il bordo posteriore della piastra. Poi premere verso il basso la parte anteriore.

Utilizzare provette

- ▶ Inserire completamente le provette nei fori del blocco termico.

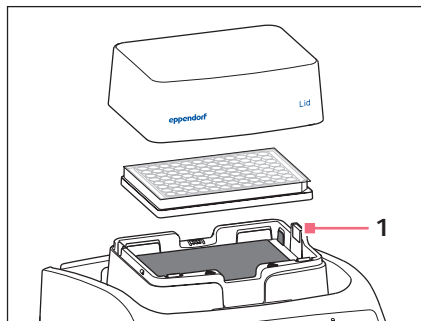Solo Eppendorf ThermoMixer FP:

- ▶ Per garantire un controllo della temperatura omogeneo, porre il coperchio sul blocco termico.


1 Sensore dell'altezza


5.3 Installazione di ThermoTop

La tecnologia **condens.protect** di ThermoTop previene la formazione di condensa sulla parete o sul tappo della provetta.

Premessa

- Le provette o le piastre sono inserite.

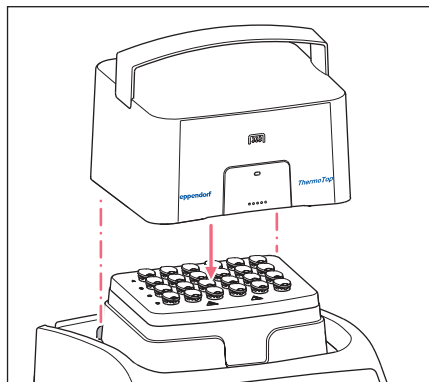

- Inserire ThermoTop verticalmente sull'apparecchio dall'alto. I perni di centraggio dietro alla piastra di riscaldamento/raffreddamento si inseriscono perfettamente nelle cavità di ThermoTop.
- ThermoTop è fissato in modo corretto quando la guarnizione aderisce completamente alla parte superiore del dispositivo.
- Il LED blu di ThermoTop si illumina.
- Il simbolo  compare sul display.



Sistema di funzionamento di ThermoTop

- Per evitare con una certa sicurezza che si formi della condensa, l'apparecchio riscalda il ThermoTop portandolo alla temperatura selezionata. Il controllo della temperatura del blocco termico avviene in modo ritardato.
- Il sensore di temperatura del blocco termico reagisce a seconda della temperatura dei campioni: dopo aver inserito i campioni in un blocco termico preriscaldato, la temperatura effettiva visualizzata può diminuire per un breve lasso di tempo.
- Mentre l'apparecchio procede al controllo della temperatura, il LED blu di ThermoTop lampeggia.

5.4 Miscelazione





La frequenza di miscelazione è impostabile in livelli di 50 rpm.

- Eppendorf ThermoMixer F0.5: 300 rpm – 2 000 rpm
- Eppendorf ThermoMixer F1.5: 300 rpm – 1 500 rpm
- Eppendorf ThermoMixer F2.0: 300 rpm – 1 500 rpm
- Eppendorf ThermoMixer FP: 300 rpm – 2 000 rpm

5.4.1 Miscelazione senza controllo della temperatura


1. Per disattivare il controllo della temperatura, premere il tasto **temp off**.

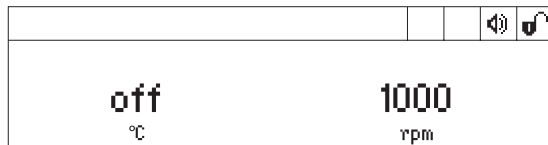

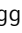
2. Con i tasti freccia **speed** impostare la frequenza di miscelazione.
3. Per avviare la procedura di miscelazione, premere il tasto **start/stop**.
 - Il simbolo  lampeggia sul display.
4. Per terminare la procedura di miscelazione, premere il tasto **start/stop**.
 - Il display mostra i parametri utilizzati per ultimi.

5.4.2 Miscelazione e controllo della temperatura

1. Con i tasti freccia **temp** impostare la temperatura.
L'apparecchio avvia immediatamente il controllo della temperatura.
2. Con i tasti freccia **speed** impostare la frequenza di miscelazione.

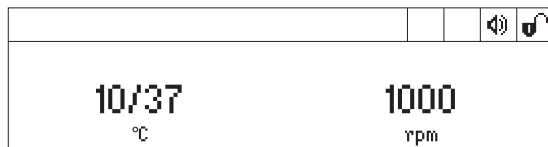

3. Per avviare la procedura di miscelazione, premere il tasto **start/stop**.
 - Il simbolo  lampeggia sul display.
 - Il display visualizza la temperatura effettiva/selezionata e la frequenza di miscelazione.
4. Per terminare la procedura di miscelazione, premere il tasto **start/stop**.
 - Il display mostra i parametri utilizzati per ultimi.
 - Il controllo della temperatura prosegue.

5.4.3 Short Mix

Utilizzare la funzione Short Mix per una miscelazione breve senza controllo della temperatura.

1. Con i tasti freccia **speed** impostare la frequenza di miscelazione.
2. Tenere premuto il tasto **short**.
La procedura di miscelazione viene effettuata solo se si tiene premuto il tasto **short**.
3. Per terminare Short Mix, rilasciare il tasto **short**.

5.5 Controllo della temperatura



AVVISO! Danni ai componenti elettronici dovuti a formazione di condensa.

In seguito al trasporto dell'apparecchio da un ambiente freddo a un ambiente più caldo si può formare della condensa all'interno dell'apparecchio stesso.

- Dopo l'installazione del dispositivo, aspettare almeno 3 h. Soltanto dopo collegare il dispositivo alla rete elettrica.


Eppendorf ThermoMixer F0.5/F1.5/F2.0/FP può regolare la temperatura in un intervallo da 4 °C sopra la temperatura ambiente a 100 °C.




- Se la temperatura effettiva lampeggia sul display, l'apparecchio non effettua il controllo della temperatura.
- Non appena la temperatura selezionata viene modificata con i tasti freccia **temp**, l'apparecchio inizia ad effettuare il controllo della temperatura.
- Quando la temperatura selezionata viene raggiunta, il display mostra solo un valore.

5.5.1 Controllo della temperatura senza procedura di miscelazione

1. Per disattivare la funzione di miscelazione, selezionare con i tasti freccia **speed** l'impostazione 0 rpm (▼ prima di 300 rpm o ▲ dopo 1 500 rpm o 2 000 rpm).

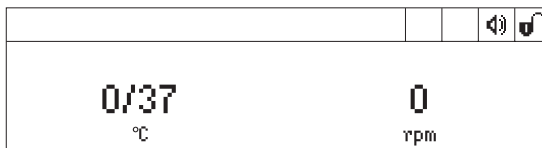






2. Con i tasti freccia **temp** impostare la temperatura.
 - L'apparecchio avvia immediatamente il controllo della temperatura.
 - Se la temperatura effettiva non viene modificata, la temperatura effettiva lampeggia sul display e l'apparecchio non effettua il controllo della temperatura.
3. Per avviare manualmente la procedura di miscelazione, premere il tasto **start/stop**.
 - Il simbolo  lampeggia sul display.
 - Il display visualizza la temperatura effettiva/selezionata.






5.6 Menu

5.6.1 Navigazione all'interno del menu

Per modificare le impostazioni, procedere generalmente come indicato di seguito.

1.		Per aprire il menu, premere il tasto menu/enter .
2.		Selezionare la voce di menu con il tasto freccia del menu.
3.		Per confermare la scelta, premere il tasto menu/enter .
4.		Modificare le impostazioni con i tasti freccia del menu.
5.		Per confermare l'impostazione modificata, premere il tasto menu/enter Davanti all'impostazione compare un segno di spunta.
6.		Per uscire dal livello di menu, selezionare la voce di menu <i>Back</i> e premere il tasto menu/enter .

5.6.2 Struttura del menu


Voci di menu e opzioni	Descrizione	Simbolo sul display
Blocca tasti (<i>Key lock</i>) <ul style="list-style-type: none"><i>Key lock on</i><i>Key lock off</i>	<ul style="list-style-type: none">I parametri non possono essere modificati.I parametri possono essere modificati.	 
Volume (<i>Volume</i>)	Il segnale acustico per i messaggi di anomalia viene emesso sempre a un volume medio indipendentemente dalle impostazioni dell'altoparlante. <ul style="list-style-type: none">Impostazione del volume dell'altoparlante: <i>Volume 1, Volume 2, Volume 3</i>Spegnimento dell'altoparlante: <i>Volume off</i>	 
Contrasto (<i>Contrast</i>)	<ul style="list-style-type: none">Impostazione del contrasto: <i>0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %</i>	
Manutenzione (<i>Servizio di assistenza</i>)	<ul style="list-style-type: none">Impostazione dell'intervallo di manutenzione: <i>Dopo 500 ore di esercizio</i> <i>Dopo 1000 ore di esercizio</i> <i>Dopo 2000 ore di esercizio</i> <i>Nessuna notifica</i>	

Back: passare al livello menu successivo verso l'alto.

5.7 Caricamento dei parametri salvati

Con i tasti da **37 °C** a **95 °C** è possibile selezionare rapidamente una temperatura per una procedura senza limitazioni del controllo della temperatura. Con il tasto **temp off** si disattiva il controllo della temperatura.

	Temperatura	Frequenza di miscelazione
Premere il tasto 37 °C	37 °C	<i>off</i>
Premere il tasto 42 °C	42 °C	<i>off</i>
Premere il tasto 56 °C	56 °C	<i>off</i>
Premere il tasto 95 °C	95 °C	<i>off</i>
Premere il tasto temp off	<i>off</i>	<i>off</i>

- ▶ Per richiamare una temperatura memorizzata, premere un tasto programma (da **37 °C** a **95 °C**).
 - Il LED al di sopra del tasto si illumina con una luce blu.
 - Il display indica i parametri salvati.
 - ▶ Per avviare il controllo della temperatura, premere il tasto **start/stop**.
 - ▶ Per controllare la temperatura e contemporaneamente miscelare, impostare anche la frequenza di miscelazione con i tasti freccia **speed**.
-  Per uscire dalla schermata dei parametri, impostare altri valori della temperatura o della frequenza di miscelazione.

Risoluzione dei problemi

Eppendorf ThermoMixer® F0.5/F1.5/F2.0/FP
Italiano (IT)

6 Risoluzione dei problemi

Se con le misure proposte non è possibile eliminare l'errore, rivolgersi al proprio partner Eppendorf locale. L'indirizzo di contatto è reperibile in Internet al sito www.eppendorf.com.

6.1 Anomalie generiche

Sintomo/ messaggio	Causa	Rimedio
Il display non si illumina.	<ul style="list-style-type: none"> Nessun collegamento alla rete. 	<ul style="list-style-type: none"> ► Controllare il collegamento alla rete e l'alimentazione di corrente. ► Accendere l'apparecchio.
La temperatura selezionata non viene raggiunta.	La temperatura selezionata si trova al di sopra della temperatura ambiente per meno di 4 °C.	<ul style="list-style-type: none"> ► Collocare l'apparecchio in un ambiente più fresco.
Il LED di ThermoTop non si illumina.	<ul style="list-style-type: none"> L'interfaccia tra l'apparecchio e ThermoTop è sporca. 	<ul style="list-style-type: none"> ► Liberare il lato anteriore di ThermoTop dalle impurità. ► Liberare il lato superiore dell'apparecchio dalle impurità, in particolare la finestra di visualizzazione a monte del blocco termico.
ThermoTop non ha la misura giusta per essere fissato sul dispositivo.	Il coperchio si trova sul blocco termico.	<ul style="list-style-type: none"> ► Se si utilizza ThermoTop, non utilizzare il coperchio.
L'apparecchio non miscela o non controlla la temperatura.	Ci sono varie cause possibili.	<ul style="list-style-type: none"> ► Contattare il proprio partner Eppendorf locale.

6.2 Messaggi di anomalia

Sintomo/ messaggio	Causa	Rimedio
Messaggio di anomalia con codice numerico predefinito.	<ul style="list-style-type: none"> Ci sono varie cause possibili. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spegner l'apparecchio e attendere 10 secondi. 2. Accendere l'apparecchio. <p>Se il messaggio di anomalia compare di nuovo, contattare il proprio partner Eppendorf locale.</p>

7 Manutenzione

7.1 Impostazione dell'intervallo di manutenzione

Eppendorf ThermoMixer F0.5/F1.5/F2.0/FP offre la possibilità di impostare un avviso che ricorda di effettuare la manutenzione. Per impostare un intervallo di manutenzione, procedere come indicato di seguito.

1. Sotto *Menu > Settings* > selezionare la voce di menu *Servizio di assistenza*. Confermare con il tasto **menu/enter**.
2. Selezionare l'intervallo di manutenzione con i tasti freccia del menu (dopo 500, 1 000 o 2 000 ore di funzionamento).
Per disattivare la comunicazione, selezionare *No notification*.

Una volta trascorse le ore di funzionamento selezionate, compare un messaggio. Rivolgersi al proprio partner Eppendorf locale. Gli indirizzi per il contatto sono riportati su internet alla pagina www.eppendorf.com/worldwide.

7.2 Pulizia

Pulire regolarmente l'alloggiamento di Eppendorf ThermoMixer F0.5/F1.5/F2.0/FP.



PERICOLO! Scosse elettriche dovute all'infiltrazione di liquidi.

- ▶ Prima di procedere con la manutenzione o la pulizia, spegnere l'apparecchio e staccarlo dalla rete elettrica.
- ▶ Impedire ai liquidi di penetrare all'interno dell'alloggiamento.
- ▶ Utilizzare provette e piastre chiuse.
- ▶ Non effettuare alcuna pulizia o disinfezione a spruzzo sul corpo dell'apparecchio.
- ▶ Collegare di nuovo l'apparecchio all'alimentazione elettrica solo dopo averne completamente asciugato l'interno e l'esterno.



AVVISO! Danni dovuti a sostanze chimiche aggressive.

- ▶ Non utilizzare sull'apparecchio e sugli accessori prodotti chimici aggressivi quali, ad esempio, basi forti e deboli, acidi forti, acetone, formaldeide, idrocarburi alogenati o fenoli.
- ▶ In caso di contaminazione con sostanze chimiche aggressive, pulire immediatamente l'apparecchio con un detergente neutro.



AVVISO! Corrosione dovuta a detersivi e disinfettanti aggressivi.

- ▶ Non utilizzare detersivi corrosivi né solventi aggressivi o lucidi abrasivi.
- ▶ Non utilizzare detersivi da laboratorio con ipoclorito di sodio.

Dispositivo ausiliario

- Panno antipilling,
- Detergente per laboratorio blando a base di sapone,
- Acqua distillata.

Pulizia di Eppendorf ThermoMixer F0.5/F1.5/F2.0/FP

1. Spegner Eppendorf ThermoMixer F0.5/F1.5/F2.0/FP e scollegarlo dalla rete elettrica.
2. Pulire tutte le parti esterne del Eppendorf ThermoMixer F0.5/F1.5/F2.0/FP con una soluzione delicata di sapone ed un panno antipilling.
3. Pulire la soluzione di sapone con acqua distillata.
4. Asciugare tutti i componenti che sono stati puliti.

7.3 Disinfezione/Decontaminazione

**PERICOLO! Scosse elettriche dovute all'infiltrazione di liquidi.**

- ▶ Prima di procedere con la manutenzione o la pulizia, spegnere l'apparecchio e staccarlo dalla rete elettrica.
 - ▶ Impedire ai liquidi di penetrare all'interno dell'alloggiamento.
 - ▶ Utilizzare provette e piastre chiuse.
 - ▶ Non effettuare alcuna pulizia o disinfezione a spruzzo sul corpo dell'apparecchio.
 - ▶ Collegare di nuovo l'apparecchio all'alimentazione elettrica solo dopo averne completamente asciugato l'interno e l'esterno.
-

Dispositivo ausiliario

- Panno antipilling,
 - Disinfettanti.
1. Spegner il Eppendorf ThermoMixer F0.5/F1.5/F2.0/FP e staccarlo dall'alimentazione di rete.
 2. Lasciare raffreddare l'apparecchio.
 3. Pulire l'apparecchio(vedi *Pulizia a pag. 27*).
 4. Scegliere un metodo di disinfezione che sia conforme alle disposizioni e alle direttive di legge vigenti per il proprio campo d'applicazione.
 5. Detergere le superfici con il panno antipilling con disinfettante.

7.4 Decontaminazione prima della spedizione

Se l'apparecchio viene spedito al servizio di assistenza tecnica autorizzato per la riparazione o al concessionario per lo smaltimento, fare attenzione a quanto segue.



AVVERTENZA! Pericolo per la salute dovuto a contaminazione dell'apparecchio.

1. Osservare le avvertenze del certificato di decontaminazione. Sono consultabili in formato PDF sul nostro sito Internet (www.eppendorf.com/decontamination).
 2. Decontaminare tutti i componenti che si desidera spedire.
 3. Allegare alla spedizione la certificazione di decontaminazione compilata in tutte le sue parti.
-

7.5 Validazione del controllo della temperatura

Per verificare la precisione della temperatura del blocco termico, utilizzare Eppendorf Temperature Verification System – Single Channel. In combinazione con il sensore di temperatura per Eppendorf ThermoMixer F0.5/F1.5/F2.0/FP è possibile misurare l'esatta temperatura del blocco termico.

Indicazioni sulla verifica con Eppendorf Temperature Verification System – Single Channel sono riportate nelle relative istruzioni per l'uso.

8 Trasporto, immagazzinamento e smaltimento

8.1 Trasporto



ATTENZIONE! Pericolo di lesioni a causa del sollevamento e del trasporto di carichi pesanti

L'apparecchio è pesante. Sollevarlo e trasportarlo può causare lesioni alla schiena.

- ▶ Trasportare e sollevare l'apparecchio con un numero sufficiente di aiutanti.
- ▶ Per il trasporto, utilizzare un apposito supporto.

- ▶ Utilizzare l'imballaggio originale per il trasporto.

	Temperatura dell'aria	Umidità relativa	Pressione atmosferica
Trasporto generale	-25 °C – 60 °C	10 % – 75 %	30 kPa – 106 kPa
Trasporto aereo	-40 °C – 55 °C	10 % – 75 %	30 kPa – 106 kPa

8.2 Immagazzinamento

	Temperatura dell'aria	Umidità relativa	Pressione atmosferica
Nell'imballaggio per il trasporto	-25 °C – 55 °C	10 % – 95 %	70 kPa – 106 kPa
Senza imballaggio per il trasporto	-5 °C – 45 °C	10 % – 95 %	70 kPa – 106 kPa

8.3 Smaltimento

In caso di smaltimento del prodotto rispettare le relative disposizioni di legge applicabili.

Nota sullo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici nella Comunità Europea

Nell'ambito della Comunità Europea lo smaltimento degli apparecchi elettrici viene definito dalle normative nazionali che si basano sulla Direttiva UE 2002/96/CE sui Rifiuti di Appareati Elettrici ed Elettronici (RAEE).

In base a questa direttiva, tutti i dispositivi immessi sul mercato dopo il 13.08.2005 in ambito business-to-business (nel quale questo prodotto rientra) non devono essere smaltiti assieme ai rifiuti comunali o domestici. Per documentare tutto ciò i prodotti riportano la seguente indicazione:



Poiché le normative in materia di smaltimento all'interno della UE possono divergere di paese in paese, Vi preghiamo di metterVi in contatto con il Vostro fornitore in caso di necessità.

In Germania questo obbligo di marcatura è entrato in vigore a partire dal 23/03/2006. Da tale data il produttore è tenuto ad offrire una possibilità di ritiro adeguata per tutti gli apparecchi forniti a partire dal 13/08/2005. Per lo smaltimento conforme di tutti gli apparecchi forniti prima del 13/08/2005 è responsabile l'utente finale.

Specifiche tecniche

Eppendorf ThermoMixer® F0.5/F1.5/F2.0/FP
Italiano (IT)

9 Specifiche tecniche**9.1 Alimentazione**

Collegamento alla rete	100 V – 130 V ± 10 %, 50 Hz – 60 Hz 220 V – 240 V ± 10 %, 50 Hz – 60 Hz
Consumo di energia	al massimo 200 W
Categoria di sovratensione	II
Grado di imbrattamento	2
Classe di protezione	I

9.2 Peso/dimensioni

Dimensioni	Larghezza:	20,6 cm (8.1 in)
	Profondità:	30,4 cm (12.0 in)
	Altezza:	ThermoMixer F0.5: 16,3 cm (6.4 in) ThermoMixer F1.5: 17,0 cm (6.7 in) ThermoMixer F2.0: 17,0 cm (6.7 in) ThermoMixer FP: 16,4 cm (6.5 in)
Peso	ThermoMixer F0.5: 6,2 kg (13.7 lb) ThermoMixer F1.5: 6,3 kg (13.9 lb) ThermoMixer F2.0: 6,3 kg (13.9 lb) ThermoMixer FP: 6,1 kg (13.4 lb)	

9.3 Condizioni ambientali

Ambiente	Utilizzo solo in ambienti interni.
Temperatura ambiente	5 °C – 40 °C
Umidità relativa	10 % – 90 %, senza formazione di condensa.
Pressione atmosferica	79,5 kPa – 106 kPa

9.4 Parametri di applicazione
9.4.1 Controllo della temperatura

Intervallo di controllo della temperatura	Minimo: 4 °C al di sopra della temperatura ambiente Massimo: 100 °C Impostazione della temperatura nell'intervallo 1 °C – 100 °C, impostabile in livelli di 1 °C	
Precisione di temperatura	Temperatura selezionata 20 °C – 45 °C	Temperatura selezionata < 20 °C o > 45 °C
Eppendorf ThermoMixer F0.5	±0,5 °C	±0,5 °C
Eppendorf ThermoMixer F1.5	±0,5 °C	±0,5 °C
Eppendorf ThermoMixer F2.0	±0,5 °C	±0,5 °C
Eppendorf ThermoMixer FP	±1,0 °C	±4,0 °C
Omogeneità della temperatura riferito a tutte le posizioni del blocco termico	Temperatura selezionata 20 °C – 45 °C	Temperatura selezionata < 20 °C o > 45 °C
Eppendorf ThermoMixer F0.5/F1.5/F2.0/FP	±0,5 °C	±1,5 °C
Veloc. riscald.	Eppendorf ThermoMixer F0.5: 15 °C/min Eppendorf ThermoMixer F1.5: 11 °C/min Eppendorf ThermoMixer F2.0: 13 °C/min Eppendorf ThermoMixer FP: 18 °C/min Variazione della temperatura ritardata in provette riempite.	

9.4.2 Miscelazione

Frequenza di miscelazione impostabile in livelli di 50 rpm	
Eppendorf ThermoMixer F0.5	300 rpm – 2 000 rpm
Eppendorf ThermoMixer F1.5	300 rpm – 1 500 rpm
Eppendorf ThermoMixer F2.0	300 rpm – 1 500 rpm
Eppendorf ThermoMixer FP	300 rpm – 2 000 rpm

9.5 Interfaccia

Interfaccia USB	Solo per l'assistenza Eppendorf.
-----------------	----------------------------------

10 Informazioni per l'ordine

**ATTENZIONE! Rischi per la sicurezza dovuti ad accessori e pezzi di ricambio errati.**

Gli accessori e i pezzi di ricambio non raccomandati da Eppendorf pregiudicano la sicurezza, il funzionamento e la precisione del dispositivo. Per i danni causati da accessori o pezzi di ricambio che non siano quelli raccomandati da Eppendorf o dovuti ad un utilizzo improprio, si esclude ogni garanzia e responsabilità da parte di Eppendorf.

- Usare esclusivamente accessori raccomandati da Eppendorf e pezzi di ricambio originali.

10.1 Apparecchio e accessori

Cod. ord. (versione internazionale)	Cod. ord. (America settentrionale)	Descrizione
5386 000.010 –	– 5386000028	ThermoMixer F0.5 con blocco termico per 24 provette da 0,5 mL 220 V – 240 V 100 V – 130 V
5384 000.012 –	– 5384000020	ThermoMixer F1.5 con blocco termico per 24 provette da 1,5 mL 220 V – 240 V 100 V – 130 V
5387 000.013 –	– 5387000021	ThermoMixer F2.0 con blocco termico per 24 provette da 2,0 mL 220 V – 240 V 100 V – 130 V
5385 000.016 –	– 5385000024	ThermoMixer FP con blocco termico per micropiastre e piastre Deepwell 220 V – 240 V 100 V – 130 V
5308 000.003	5308000003	ThermoTop con tecnologia condens.protect
5363 000.233	5363000233	Lid per ThermoMixer F0.5/F1.5/F2.0/FP

10.2 Provette e piastre

Cod. ord. (versione internazionale)	Cod. ord. (America settentrionale)	Descrizione
0030 121.023	022363611	Eppendorf provette Safe-Lock 0.5 mL 500 pezzi incolori
0030 120.086	-	Eppendorf provette Safe-Lock 1.5 mL 1 000 pezzi incolori
0030 120.094	-	Eppendorf provette Safe-Lock 2.0 mL 1 000 pezzi incolori
0030 521.102	951031003	Eppendorf Deepwell Plate 384/200 µL 40 piastre, pozzetto incolore, bordo bianco PCR Clean
0030 501.101	951031801	Eppendorf Deepwell Plate 96/500 µL 40 piastre, pozzetto incolore, bordo bianco PCR Clean
0030 501.209	951032603	Eppendorf Deepwell Plate 96/1000 µL 20 piastre, pozzetto incolore, bordo bianco PCR Clean
0030 501.306	951033405	Eppendorf Deepwell Plate 96/2000 µL 20 piastre, pozzetto incolore, bordo bianco PCR Clean

Tutte le piastre sono disponibili con diversi colori dei bordi (rosso, giallo, verde e blu) e livelli di purezza, in confezioni grandi nonché a richiesta con codici a barre. Maggiori informazioni sono consultabili sul nostro catalogo o la nostra pagina web www.eppendorf.com.

10.3 Temperature Verification System

Cod. ord. (versione internazionale)	Cod. ord. (America settentrionale)	Descrizione
0056 000.003	0056000003	Temperature Verification System USB – Single channel Per Mastercycler nexus, Mastercycler pro und Mastercycler ep, ThermoMixer, ThermoStat
0056 002.006	0056002006	Sensore di temperatura per Temperature Verification System USB – Single channel 384 Well

Indice

A

Altoparlanti	
Simbolo.....	19
Avvertenze di sicurezza.....	12

B

Blocca tasti	
Impostazione.....	24
Simbolo.....	19
Blocco termico.....	8

C

condens.protect.....	21
Conservazione.....	30
Controllo della temperatura.....	23
Disattivazione del controllo della	
temperatura.....	22
Parametri di applicazione.....	33
Simbolo.....	19
Coperchio.....	6

D

Dati tecnici	
Alimentazione.....	32
Decontaminazione.....	29
Display.....	8, 19

E

Elementi di comando.....	8, 18
--------------------------	-------

F

Frequenza di miscelazione.....	19
Impostazione.....	18

G

Glossario.....	6
----------------	---

I

Illustrazione generale.....	7
Installazione	
Apparecchio.....	17
Scelta dell'ubicazione.....	17
Interfaccia USB.....	8
Interruttore di rete.....	8

L

LID.....	20
----------	----

M

Menu.....	24
Navigazione.....	24
Panoramica.....	24
Tasto freccia del menu.....	18
Micropiastra per test.....	6, 20
Miscelazione.....	21
Arresto.....	18
Avvio.....	18
Parametri di applicazione.....	33
Regolare la frequenza di	
miscelazione.....	21
senza controllo della temperatura.....	22
Simbolo.....	19

P

Parametri di applicazione.....	33
PCR.....	6
Pericoli.....	12
Piastra deepwell.....	6, 20
Piastra PCR.....	6, 20
Pozzetto.....	6
Presa di collegamento alla rete.....	8
Provette.....	20
Pulizia.....	28

R

rpm.....	6
----------	---

S

Scelta dell'ubicazione.....	17
Short Mix.....	18, 22
Simboli di pericolo	
Apparecchio	16
Smaltimento	30
Specifiche tecniche	
Condizioni ambientali.....	32
Parametri di applicazione.....	33
Peso/massa	32

T

Tasto della temperatura.....	18
Temperatura	
Impostazione	18
Temperatura effettiva	19
Temperatura selezionata	19
ThermoTop	6, 21
Simbolo.....	19

U

Uso conforme	
Pericoli.....	12

V

Validazione del controllo della temperatura	29
Veloc. riscald.	33
Volume	
Impostazione	24

Declaration of Conformity

The product named below fulfills the requirements of directives and standards listed. In the case of unauthorized modifications to the product or an unintended use this declaration becomes invalid.

Product name:

Eppendorf ThermoMixer® F1.5, Eppendorf ThermoMixer® FP
Eppendorf ThermoMixer® F0.5, Eppendorf ThermoMixer® F2.0
including accessories

Product type:

Thermomixer for test tubes and plates

Relevant directives / standards:

2006/95/EC: EN 61010-1, EN 61010-2-051,
UL 61010-1, CAN/CSA C22.2 No. 61010-1
2004/108/EC: EN 55011, EN 61326-1
2011/65/EU



Management Board



Portfolio Management

Date: December 06, 2013

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf AG · 22331 Hamburg · Germany
eppendorf@eppendorf.com

ISO 9001
Certified

ISO 13485
Certified

ISO 14001
Certified

Eppendorf® and the Eppendorf Logo are registered trademarks of Eppendorf AG Hamburg/Germany.
All rights reserved incl. graphics and pictures. Copyright 2013 © by Eppendorf AG.

Evaluate your manual

Give us your feedback.
www.eppendorf.com/manualfeedback

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf AG · 22331 Hamburg · Germany
eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com